

Pokyny na použitie

QUIXX®

Nos je vstupnou bránou do dýchacích ciest a chráni pľúca.

Predtým ako sa dostane vzduch do pľúc, zdravý nos vzduch filtruje, pričom zachytáva častice malé ako peľové zrnko, zvlhčuje vzduch, ktorý dýchame a ohrieva studený vzduch na telesnú teplotu.

Pri nádche, chrípke a alergiách spojených s upchatým nosom alebo výtokom z nosa sú tieto funkcie nosa porušené. Quixx® uvoľňuje upchatý nos, pomáha obnoviť normálne funkcie nosa a zlepšuje dýchanie nosom.

1. ČO JE QUIXX® A AKO PÔSOBÍ

100 ml Quixxu® obsahuje 84,6 ml prírodnej morskej vody a 15,4 ml čistenej vody. Roztok je číry, bezfarebný a bez zápachu.

Quixx® je hypertonický nosový sprej (koncentrácia soli zodpovedá približne 26 g NaCl na liter). Obsahuje prírodnú morskú vodu z Atlantického oceánu s hodnotnými minerálnymi látkami a stopovými prvkami.

Quixx® je prírodná pomoc pri upchatých nosových dutinách a upchatých prínosových dutinách, rovnako ako pri upokojení citlivej nosovej sliznice, čo je mimoriadne dôležité na udržanie zdravého dýchacieho ústrojenstva.

ČO ROBÍ QUIXX® NA ZLEPŠENIE VÁŠHO DÝCHANIA

- Účinne uvoľňuje upchatie nosa a nosových dutín spôsobené nádchou, chrípkou alebo alergiami
- Aktívne čistí nosové dutiny
- Zvlhčuje nosovú sliznicu

Na základe toho Quixx® pomáha obnoviť funkcie nosa, čo vedie k zníženiu rizika komplikácií (sinusitída, otitída) a k zlepšeniu dýchania.

QUIXX® MÁ TIEŽ NASLEDUJÚCE VÝHODY

- Obsahuje iba prírodné zložky
- Neobsahuje konzervačné látky
- Nevyvoláva návyk
- Je bezpečný pri dlhodobom používaní

2. KTO MÔŽE POUŽÍVAŤ QUIXX®

Dospelí, deti a dojčatá vo veku od 6 mesiacov.

Quixx® sa môže používať aj počas tehotenstva a dojčenia.

3. AKO POUŽÍVAŤ QUIXX®

Quixx® používajte vždy presne podľa týchto pokynov na použitie. Ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie:

Dojčatá (vo veku od 6 mesiacov) a deti:

1 až 2 vstreky do každej nosnej dierky 2 až 3-krát denne.

Dospelí:


1 až 3 vstreky do každej nosnej dierky 2 až 3-krát denne.

Doba používania je neobmedzená.

Používanie spreja:

Snímte kryt. "Prestrieknite" fľašku tak, že niekoľkokrát napumpujete sprej, pokiaľ sa nevytvorí jemná hmla (obr. 1). Teraz je sprej pripravený na použitie:

Vložte aplikátor do Vašej nosnej dierky a zatlačte na prstenec na ktorejkoľvek strane aplikátora (obr. 2). Po každom použití vyčistite aplikátor a nasadte kryt.

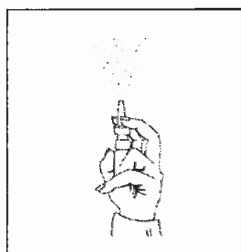

Obr. 1



Obr. 2

Nepoužívajte Quixx® po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po symbole Symbol pieskového skla EN 980.

Quixx® sa môže používať až do 6 mesiacov od prvého použitia.

4. KONTRAINDIKÁCIE

Precitlivenosť (alergia) na morskú vodu.

5. VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Na začiatku používania sa môže vyskytovať mierny pocit štipania.

6. AKO UCHOVÁVAŤ QUIXX®

- Uchovávajte pri izbovej teplote.
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. DRUH OBALU

Quixx® sa dodáva vo fľaške obsahujúcej 30 ml roztoku. Fľaška obsahuje zabudovaný antibakteriálny systém pumpy, ktorý zabraňuje rekontaminácii počas celej doby používania.

Každá fľaška obsahuje približne 220 vstrekov.

Quixx® je zdravotnícka pomôcka.

CE

Výrobca:
Pharmaster
ZI de Krafft
67150 Erstein
Francúzsko

Distribútor:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicke Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Posledná revízia 01/2009